

# Báscula Rice Lake para Adulto e Infante

## Instrucciones de Operación

### Modelo D400

La Báscula Rice Lake para Adulto e Infante lleva a la tradicional báscula de baño a una nueva dimensión. Activada tanto por baterías como por un adaptador CA, esta báscula le permite obtener el peso del infante mientras lo sostiene en los brazos.



Este manual puede verse o descargarse desde el sitio web de Rice Lake Weighing Systems en [www.ricelake.com/health](http://www.ricelake.com/health).

### Características Estándar

- Suministro Eléctrico: Cuatro Baterías tipo AA (incluidas)
- Adaptador CA (incluido)
- El peso se muestra en libras o kilogramos
- Encendido al accesarla y apagado al salir
- Pantalla LCD de fácil lectura
- Modo de pesaje Adulto-Infante
- Dimensiones de plataforma: 12.68 plg Largo x 12.68 plg Ancho x 1.97 plg Alto (322 mm Largo x 322 mm Ancho x 50 mm Alto)
- Capacidad y graduación: 440 lb (200 kg) x 4 oz (0.1 kg)



Figura 1. Modelo D400



Para evitar daños personales al usuario o daños a la báscula, siga cuidadosamente las instrucciones:

- No intente trasladar la báscula mientras alguien se encuentre arriba de ella.
- No deje caer la báscula o la someta a golpes.
- Para un pesaje preciso, coloque la báscula en una superficie plana y estable.
- Un peso que exceda la capacidad máxima (440 lb/200 kg) puede dañar la báscula.
- La báscula no es a prueba de agua, por lo que debe evitar exponerla a exceso de humedad.
- Nunca coloque la báscula cerca de dispositivos de calefacción.
- Esta báscula no debe ser empleada por personas discapacitadas, física o intelectualmente, o con deficiencias, al menos que sean supervisadas por personal responsable por ellos.

### Instalación y Uso de la Báscula

1. Retire del empaque la báscula prensamblada.
2. Coloque la báscula en una superficie plana y estable y libre de humedad para evitar resbalones.
3. Conecte el adaptador de CA o inserte las baterías tipo AA.
4. Con el **switch** para alternar pesos, que se localiza en la parte baja de la unidad, seleccione lb o kg.

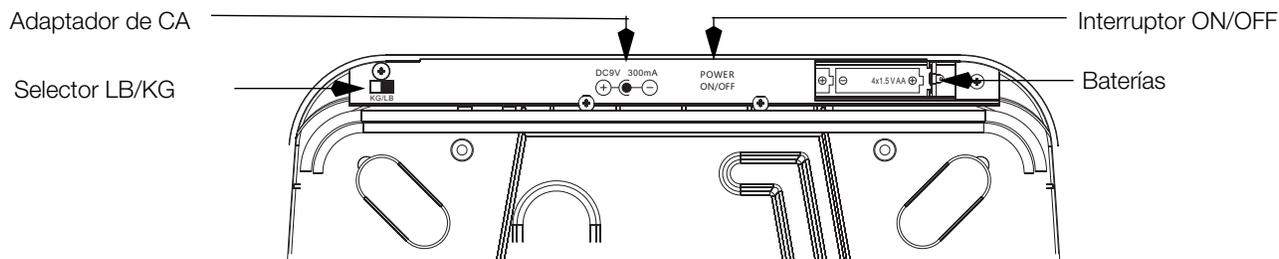


Figura 2. Vista Inferior de la Báscula Adulto e Infante

5. Use el **switch POWER ON/OFF**, que se ubica en la parte inferior, para activar la báscula.

6. Encienda la báscula presionando ligeramente el botón plateado en la base de la báscula.



Figura 3. Botón On/Off

7. Suba a la báscula y coloque los pies de tal manera que el peso se distribuya uniformemente en la plataforma.

### Modo Normal de Pesaje

Su peso se mostrará, dependiendo de su elección, en lb o kg.

8. Baje de la báscula. Su peso se mostrará en la pantalla.

### Modo de Pesaje de Adulto e Infante

9. Presione el botón plateado que se muestra en la Figura 3 para acceder al modo de pesaje Adulto e Infante. La pantalla exhibirá 0.0.
10. Suba nuevamente a la báscula, cargando al infante. La báscula ignorará el peso del adulto al pesarse juntos Adulto e Infante, permaneciendo solamente el peso del infante.
11. Baje de la báscula y presione nuevamente el botón plateado para regresar la báscula a ceros y apagarla.
12. Al transportar la báscula, coloque el *switch* **POWER ON/OFF** en posición *off* (mostrado en la figura 2) para mantener la vida de la báscula.

## Cuidado de la Báscula

Periódicamente limpie la superficie de la báscula con una franela húmeda para eliminar el polvo. Para polvos difíciles, use una franela humedecida con detergente. Guarde la báscula en un lugar limpio y seco.

## Garantía Limitada

Rice Lake Weighing Systems (RLWS) garantiza que todo el equipo y sistemas RLWS, adecuadamente instalados por un Distribuidor o por el Fabricante Original del Equipo (OEM por sus siglas en Inglés), operará de acuerdo a especificaciones por escrito confirmadas por el Distribuidor y por OEM y aceptadas por RLWS. Todos los sistemas y componentes se garantizan contra defectos de materiales o mano de obra por dos años.

RLWS garantiza que el equipo hasta aquí vendido se conforma a las especificaciones por escrito y autorizadas por RLWS. RLWS garantiza el equipo contra mano de obra defectuosa y materiales defectuosos. En el caso en que cualquier equipo falle para conformarse a estas garantías, RLWS, a su criterio, reparará o reemplazará tales bienes regresados dentro del periodo de garantía, sujetos a las siguientes condiciones:

- Al descubrir el comprador alguna inconformidad, se le notificará de inmediato a RLWS por escrito, con una explicación detallada de las deficiencias en alegato.
- Los componentes electrónicos individuales regresados a RLWS con fines de garantía, deberán ser empacados para prevenir daños por descargas electrostáticas (ESD, por sus siglas en Inglés). Los requisitos de empaque se enlistan en la publicación *Protecting Your Components From Static Damage in Shipment*, disponible en el Departamento de Devoluciones de Equipo de RLWS (Equipment Return Department).
- El examen de tal equipo es el que confirma que la inconformidad existente actualmente, no fue causada por accidente, mal uso, negligencia, alteración, instalación no apropiada, reparación inadecuada o prueba inadecuada; RLWS será el único en juzgar todas las inconformidades en alegato.
- Que tal equipo no ha sido modificado, alterado o cambiado por personal ajeno a RLWS o sus distribuidores autorizados.
- RLWS contará con un tiempo razonable para reparar o reemplazar el equipo defectuoso. El comprador se responsabiliza por los cargos de transporte en ambos sentidos.
- En ningún caso RLWS será responsable por el tiempo de traslado o reparación en el lugar, incluyendo ensamblado y desensamblado del equipo, ni será responsable por el costo de reparación realizado por otros.

**ESTAS GARANTÍAS EXCLUYEN CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍA SIN LÍMITE DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. NI RLWS NI EL DISTRIBUIDOR, EN NINGÚN CASO, SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS INCIDENTALES O DE CONSECUENCIA.**

**RLWS Y EL COMPRADOR ACUERDAN QUE LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE RLWS DE AQUÍ EN ADELANTE SE LIMITA A REPARAR O REMPLAZAR DICHS BIENES. AL ACEPTAR ESTA GARANTÍA, EL COMPRADOR RENUNCIA A CUALQUIER OTRA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA.**

**AL SER EL VENDEADOR DIFERENTE DE RLWS, EL COMPRADOR ACUERDA DIRIGIRSE SOLO AL VENDEADOR EN CASOS DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA. NO HAY TÉRMINOS, CONDICIONES, ENTENDIMIENTOS O ACUERDOS TENDIENTES A MODIFICAR LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA, QUE TENGAN EFECTO LEGAL, AL MENOS HECHOS POR ESCRITO Y FIRMADOS POR UN EJECUTIVO DE RLWS Y EL COMPRADOR**